

## ANTI-STRIATED MUSCLE ANTIBODY TEST SYSTEM

For In Vitro Diagnostic Use

AD SRM48 48 Tests  
AD SRM96 96 Tests

### Introduction:

Clinical and experimental evidence strongly suggests that circulating antibodies directed against acetylcholine receptor (AChR) and muscle cell antigens are important in the pathogenesis of myasthenia gravis.<sup>1-3</sup> Several antibody mediated mechanisms have been implanted in the alteration of neuromuscular transmission, including (1) complement mediated destruction of motor end plates with consequent AChR loss, (2) blockage of the AChR active site preventing AChR access, or (3) alteration of AChR turnover.<sup>4,5</sup> The positive response to thymectomy in patients with a short history of myasthenia gravis (MG) may be due to alteration of thymic cell populations that normally regulate antibody production.<sup>6,7</sup>

### Principles:

Tests for detections of antibodies to AChR's and muscle cell antigens can be of diagnostic value.<sup>8</sup> High titers of anti-AChR and anti-striated (Str) muscle antibodies define MG patients with thymoma.<sup>9</sup> The absence of anti-AChR or anti-Str antibodies effectively excludes MG or thymoma respectively.<sup>10</sup> Because antibody titer to either AChR or Str muscle corresponds only approximately to clinical status, their detection does not have direct prognostic value.<sup>11-13</sup> Radioimmunoassay is used for AChR antibody detection, whereas routine indirect immunofluorescence (IFA) is used for detection of anti-striated antibodies. Acetone fixed longitudinal sections of skeletal muscle is the substrate used for anti-striated detection.<sup>14</sup> Normal human sera can react with skeletal muscle in dilutions up to 1:30. A suggested screening dilution of 1:40 is recommended to increase specificity.<sup>10,15</sup>

### Materials Provided:

#### Storage & Stability of Components:

- FITC IgG (H&L) Conjugate No. AD CGER2 (3.0 ml)/AD CGER5 (5.0 ml) with Evans Blue Counterstain is to be stored at 2-8°C upon receipt. The conjugate is stable at this temperature until expiration date on the vial label.
- The antigen slides of rat striated muscle must be stored at 2-8°C upon receipt. Check label for specific expiration date.
- Anti-striated positive control No. AD PCMS (1.0 ml) should be stored at 2-8°C upon receipt. Check label for specific expiration date.
- Universal negative control No. AD NC (1.0 ml) should be stored at 2-8°C upon receipt. Check label for specific expiration date.
- Buffer Pack No. AD PBS1 - Phosphate Buffered Saline is stable at room temperature storage. Check label for specific expiration date. The reconstituted Buffer does not contain preservatives and should be stored at 2-8°C. Care should be taken to avoid contamination.
- Mounting Medium No. AD TMM3 is stable when stored at 2-8°C. Check label for specific expiration date.

### Additional Materials Required but not Provided:

Test tubes and rack or microtiter system  
Disposable pipettes  
Staining Dish and Slide Forceps  
Moisture Chamber  
Volumetric Flask (500 ml)  
Distilled H<sub>2</sub>O  
Fluorescence Microscope  
Paper Towels - lint free

### Reagent Preparation:

- Buffer Pack No. AD PBS1. Rehydrate buffer with 1 liter of sterile distilled water.

### Specimen Collection:

Serological specimens should be collected under aseptic conditions. Hemolysis is avoided through prompt separation of the serum from the clot. Serum should be stored at 2-8°C if it is to be analyzed within a few days. Serum may be held for 3 to 6 months by storage at -20°C or lower. Lipemic and strongly hemolytic serum should be avoided. When specimens are shipped at ambient temperatures, addition of a preservative such as 0.01% (thimerosal) or 0.095% sodium azide is strongly recommended.

### Test Instruction:

**Screening:** dilute test serums 1:40 in PBS. **Titration:** set up doubling dilutions of serum starting at 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, etc.

- Once slides reach room temperature tear slide envelope at notch. Carefully remove the slide and avoid touching the antigen areas. The slide is now ready to use.
- Place a drop of diluted serum (20 to 30 µl) and controls over the antigen wells.
- Place slide with patient's serum and controls in a moist chamber for 30 minutes at room temperature (approximately 24°C).
- Remove slide from moisture chamber and allow the serum to run off onto a piece of paper towel. Using a wash bottle, gently rinse remaining sera from slide being careful not to aim the rinse stream directly on to the well.
- Wash in PBS for five minutes. Repeat using fresh PBS.
- Place a blotter on the lab table with absorbent side up. Remove slide from PBS and invert so that tissue side faces absorbent side of blotter. Line up wells to blotter holes. Place slide on top of blotter. **Do not allow tissue to dry.** Wipe back of slide with dry lint free paper towel. Apply sufficient pressure to slide while wiping to absorb buffer.
- Deliver 1 drop (20-30 µl) of conjugate per antigen well. Repeat steps 3-6.
- Place 4-5 drops of mounting medium on slide.
- Apply a 22 x 70 mm coverslip. Examine the slide under a fluorescent microscope. Note: To maintain fluorescence, store mounted slide in a moisture chamber placed in a dark refrigerator.

### Quality Control:

- Positive and negative serum controls must be included in each day's testing to confirm reproducibility, sensitivity and specificity of the test procedure.

- The negative serum control should result in little (1+) or no fluorescence. If this control shows bright fluorescence, either the control, antigen, conjugate or technique may be at fault.
- The positive serum control should result in bright 3+ to 4+ fluorescence. If this control shows little or no fluorescence, either the control, antigen, conjugate or technique may be at fault.
- In addition to positive and negative serum controls, a PBS control should be run to establish that the conjugate is free from nonspecific staining of the antigen substrate. If the antigen shows bright fluorescence in the PBS control repeat using fresh conjugate. If the antigen still fluoresces, either the conjugate or antigen may be at fault.

### Results:

The IFA test will result in a cross-striation staining pattern of skeletal muscle. The percentages of patients with anti-striated antibodies vary with the clinical state (Table I).

TABLE I

Striated Muscle Antibodies and Disease State		% Anti-Str Abs
Patient Population		
1.	All MG patients	40%
2.	MG with Thymoma	90-100%
3.	MG without Thymoma	30%
4.	Thymoma without MG	25%


\*Absence of anti-Str Abs effectively excludes thymoma.

### Limitations of Procedure:

- More than one mechanism may be involved in MG. Factors like sex, age, presence or absence of thymoma, other autoantibodies, HLA type, response to thymectomy and/or immunosuppressive drugs must be considered in addition to the detection of anti-AChR and anti-Str antibodies.
- No diagnosis should be based on a single serologic test since various host factors must be taken into consideration.

### Precautions:

- All human components have been tested by radioimmunoassay for (HB<sub>s</sub>Ag) and HTLVIII/LAV by an FDA approved method and found to be negative. (Not repeatedly reactive). However, this does not assure the absence of HB<sub>s</sub>Ag or HTLVIII/LAV. All human components should be handled with appropriate care.
- The sodium azide (0.095%) included in the controls and conjugate is toxic if ingested.
- Do not use components beyond their expiration date.
- Follow the procedural instructions exactly as they appear in this insert to insure valid results.
- For In Vitro Diagnostic Use.
- Handle slides by the edges since direct pressure on the antigen wells may damage the antigen.
- Once the procedure has started do not allow the antigen in the wells to dry out. This may result in false negative test results, or unnecessary artifacts.
- Use separate pipette tips for each sample and reagent to avoid cross contamination.
- Reagents should be inspected for evidence of bacterial or fungal contamination.
- Do not reuse substrate slide.


<b>Component</b>	AD PBS1 PBS Powder Packets AD TMM3 Mounting Medium	<b>Precautionary Statement</b> <b>Prevention:</b> P264 Wash thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves and clothing.
<b>Pictogram</b>		<b>Response:</b> P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If irritation persists, get medical advice/attention.
<b>Signal Word</b>	<b>WARNING</b>	
<b>Hazard Statement</b>	H319 Causes serious eye irritation	

### BIBLIOGRAPHY:

- Vincent, A. and Newson-Davis, J. Anti-acetylcholine receptor antibodies. J Neurol Neurosurg Psych 43: 590-600, 1980.
- Peers, J. McDonald, B.L. and Dawkins, R.L. The reactivity of the antistriated antibodies associated with thymoma and myasthenia gravis. Clin Exp Immunol 27:66, 1977.
- Pachner, A.R. and Kantor, F.S. The relation of clinical disease to antibody titer, proliferative response and neurophysiology in murine experimental autoimmune myasthenia gravis. Clin Exp Immunol 51: 543, 1983.
- Drachman, D.B., Adams, R.N., Stanley, E.F. and Pestronk, A. Mechanisms of acetylcholine receptor loss in myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychol 43:601-610, 1980.
- Engel, A.G. The immunopathology of myasthenia gravis. Intl J Neurol 14:35-45, 1980.
- Newson-Davis, J., Willcox, N. and Calder, L. Thymus cells in myasthenia gravis selectively enhance production of anti-acetylcholine receptor antibody by autologous blood lymphocytes. N Engl J Med 305:1313-18, 1981.
- Berrik, S., Morel, E., Gaud, C., Raimond, F., LeBrigand, H. and Bach, J.F. Anti-AChR antibodies, thymic histology and T-cell subsets in myasthenia gravis. Neurol 34:66-71, 1984.
- Nicholson, G.A., McClod, J.G. and Griffiths, L.R. Comparison of Diagnostic Tests in Myasthenia Gravis. Clin Exp Neurol 19:45, 1982.
- Drachman, D.B., Adams, R.N., Josifek, L.F. and Self, S.G. Functional activities of an autoantibodies to acetylcholine receptors and the clinical severity of myasthenia gravis. N Engl J Med 307:769-75, 1982.
- Albini, B. and Wick, G. Myasthenia gravis. In: Principles of Immunological Diagnosis in Medicine, F. Milgrom, C.J. Abeyounis and K. Kane, Eds. Lea and Feinberger, pp 372-4, 1981.
- Hohfeld R., Sterz, R., Kalies, I., Wekerle, H. and Peper, K. Experimental myasthenia: Lack of correlation between the autoantibody titer and the reduction of acetylcholine ionic channels measured at functioning end plates. Muscle Nerve. 6:160-3, 1983.
- Biesecker, G. and Koffler, D. Immunology in myasthenia gravis. Hum Pathol 14:419-23, 1983.
- Elias, S.B. and Appel, S.H. Anti-acetylcholine receptor antibodies in myasthenia gravis, pp 52-58, Houghton-Mifflin, Boston, 1979.
- Gotte, C., Mantefazza, R. and Clementi, F. New Antigen for antibody detection in myasthenia gravis. Neurol 34:374, 1984.
- Alexander, E.L. and Sanders, S.K. F(ab')<sub>2</sub> reagents are not required if goat rather than rabbit antibodies are used to detect human surface immunoglobulin. Immunol 119: 1084-8, 1977.
- Compton, D.A.S., Vincent, A., Newson-Davis, J. and Batchelor, J.R. Clinical pathological, HLA antigen and immunological evidence for disease heterogeneity in myasthenia gravis. Brain. 103:579-601, 1980.



**ALPHADIA sa/nv**  
DIAGNOSTIC PRODUCTS  
Avenue Vésale 26  
B1300 WAVRE  
BELGIUM  
TEL : 32 (0) 10 24 26 49  
FAX : 32 (0) 10 24 55 99  
contact@alphadia.be

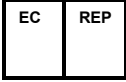

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

---



## ANTI-STRIATED MUSCLE ANTIBODY TEST SYSTEM

Réservé au diagnostic *in vitro*.

AD SRM48 48 Tests  
AD SRM96 96 Tests

### Intitulé du test:

Test de détection des anticorps anti-tissulaires anti-muscles striés par IFI

### Application:

Le test d'immunofluorescence indirecte est destiné au screening des autoanticorps anti-muscles striés circulant dans le sérum de patients.

### Principe:

La principale réaction du test implique des anticorps circulant dans le sérum du patient qui s'attachent à leurs antigènes homologues. Ceci se produit pendant la période d'incubation alors que le sérum recouvre la surface de l'antigène. Une réaction secondaire suit alors une période de rinçage qui élimine tous les anticorps humains libres. Le réactif utilisé lors de la réaction secondaire est un conjugué d'anti-globuline humaine marquée à la fluorescéine. La surface de l'antigène est ensuite soigneusement rincée pour éliminer l'excès de conjugué libre, et visualisée sous un microscope à fluorescence adaptée.

### Matériel fourni:

Conservation et stabilité des composants

1. Lames de coupe de muscles striés de rat (conserver entre 2 et 8°C)
2. Contrôle autoanticorps anti-muscles striés positif (conserver entre 2 et 8°C).
3. Contrôle négatif universel (conserver entre 2 et 8°C).
4. Conjugué ITCF anti-IgG H&L avec bleu d'Evans (conserver entre 2 et 8°C). No AD CGER2
5. Sachet de tampon No AD PBS1 - Tampon phosphate salin (le tampon reconstitué ne contient pas d'agents conservateurs et doit être conservé à 2-8°C).
6. Le liquide de montage No AD TMM3 est stable lorsqu'il est conservé entre 2 et 8°C.

### Matériel supplémentaire requis mais non fourni:

Tubes à essai et portoir ou plaques de microtitration

Tips jetables.

Bac de coloration et pinces pour lames

Chambre humide

Ballon volumétrique (500 ml)

H2O distillée

Microscope à fluorescence

Serviettes en papier (non pelucheuses)

### Préparation des réactifs:

1. Sachet de tampon No AD PBS1. Réhydrater le tampon avec 1 litre d'eau distillée stérile.

### Prélèvement des échantillons:

Les échantillons de sang doivent être prélevés dans des conditions aseptiques. Une hémolyse est évitée par une séparation rapide du sérum du caillot. Le sérum doit être conservé à 2-8 °C en cas d'analyse prévue dans un délai de quelques jours. On peut garder le sérum pendant 3 à 6 mois en le conservant à une température maximale de -20°C. Éviter les sérums lipémiques et fortement hémolytiques. Lorsque les échantillons sont expédiés à température ambiante, l'ajout d'un agent conservateur tel que 0,01 % (thimérosal) ou 0,095% d'azide de sodium est fortement conseillé.

### Instructions du test:

Test de screening: diluer les sérums du test à 1:40 dans du PBS

Titrages: préparer des dilutions sérielles du sérum à partir de 1:40 (à savoir, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 etc.)

1. Une fois les lames parvenues à température ambiante, ouvrir le conditionnement des lames en le déchirant à l'encoche. Retirer la lame avec soin et éviter de toucher les puits où se situent les antigènes. La lame est maintenant prête à l'emploi.
2. Déposer une goutte de sérum dilué (20 à 30 µl) et des contrôles sur les puits contenant les antigènes.
3. Placer la lame comportant le sérum du patient et les contrôles dans une chambre humide à température ambiante pendant 30 minutes (environ 19-24°C).
4. Enlever la lame de la chambre humide et pour permettre au sérum de s'écouler sur un morceau de serviette en papier. À l'aide d'une pissette, rincer délicatement le reste de sérum de la lame en prenant soin de détourner le jet de rinçage du puits.
5. Laver dans du PBS pendant cinq minutes. Répéter l'opération en utilisant du PBS frais.
6. Placer un buvard sur la table de laboratoire avec le côté absorbant tourné vers le haut. Retirer la lame du PBS et la retourner de manière à placer le côté frottis en face du côté absorbant du papier buvard. Absorber entre les puits à l'aide du buvard. Placer la lame sur le buvard. Ne pas laisser les tissus sécher. Essuyer le dos de la lame avec une serviette en papier sèche et non pelucheuse. Exercer suffisamment de pression sur la lame tout en l'essuyant pour absorber le tampon.
7. Déposer 1 goutte (20 à 30 µl) de conjugué dans chaque puits. Répéter les étapes 3 à 6.
8. Déposer 4 à 5 gouttes de liquide de montage sur la lame.
9. Déposer une lamelle couvre-objet de 22 x 70 mm. Examiner la lame sous un microscope à fluorescence.

Remarque: Pour maintenir la fluorescence, conserver la lame montée dans une chambre humide placée à l'obscurité dans un réfrigérateur.

### Contrôle de qualité:

1. Des contrôles de sérum positif et négatif doivent être inclus dans chaque série pour confirmer la reproductibilité, sensibilité et spécificité du mode opératoire du test.
2. Le contrôle de sérum négatif devrait faire apparaître peu (1+) ou pas de fluorescence. La mise en évidence d'une fluorescence vive par ce contrôle peut résulter du contrôle, de l'antigène, du conjugué ou de la technique.
3. Le contrôle de sérum positif devrait être à l'origine d'une fluorescence vive de 3+ à 4+. La mise en évidence d'une fluorescence faible ou inexistante par ce contrôle peut provenir du contrôle, de l'antigène, du conjugué ou de la technique.
4. En plus des contrôles de sérum positif et négatif, effectuer un contrôle PBS pour s'assurer que le conjugué ne provoque pas de coloration non spécifique du substrat antigénique. Si

l'antigène montre une fluorescence vive avec le contrôle PBS, répéter l'opération à l'aide d'un nouveau conjugué. Une fluorescence de l'antigène peut résulter d'une dégradation du conjugué ou de l'antigène.

### Résultats:

Le test donne une coloration striée du muscle squelettique. Le pourcentage de patients avec des anticorps anti-muscles striés varie selon la clinique (Tableau I).


Tableau I

Anticorps anti-muscles striés et clinique	
Patient Population	%Anti-Muscles striés
1. Tous les patients avec Myasthénie	40%
2. Myasthénie avec thymome	90-100%
3. Myasthénie sans thymome	30%
4. Thymome sans myasthénie	25%

L'absence d' anticorps anti-muscles striés exclut le thymome.

### Précautions:

1. Le HBsAg et le HTLV-III/LAV ont été testés par dosage radioimmunologique pour tous les composants d'origine humaine, par une méthode approuvée par la FDA, et se sont avérés négatifs. Ceci ne garantit toutefois pas l'absence de HBsAg ou de HTLV-III/LAV. Tous les composants d'origine humaine doivent être manipulés avec les précautions appropriées.
2. Les contrôles et le conjugué contiennent de l'azide de sodium (0,095%).
3. Ne pas utiliser les composants après leur date de péremption.
4. Suivre les instructions de la méthode exactement comme elles figurent dans cette notice afin de garantir des résultats valables.
5. Réservé au diagnostic *in vitro*.
6. Manipuler les lames par les bords car une pression appliquée directement sur les puits contenant les antigènes peut altérer l'antigène.
7. Une fois la procédure lancée, ne pas laisser sécher les antigènes des puits. Ceci peut entraîner l'obtention de résultats faussement négatifs ou l'apparition d'artefacts superflus.
8. Utiliser des tips pour chaque échantillon et réactif pour éviter la contamination croisée.
9. Les réactifs doivent être inspectés afin d'écartier une contamination bactérienne ou une contamination fongique.
10. Ne pas réutiliser les lames.

Composant	AD PBS1 PBS sachet poudre AD TMM3 liquide de montage	Déclaration de précaution <b>Prévention:</b>
Pictogramme		P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Mot de signal	<b>ATTENTION</b>	<b>Réponse:</b> P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Mention de danger	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.	

**ALPHADIA sa/nv**  
DIAGNOSTIC PRODUCTS  
Avenue Vésale 26  
B1300 WAVRE  
BELGIUM  
TEL : 32 (0) 10 24 26 49  
FAX : 32 (0) 10 24 55 99  
contact@alphadia.be



EC	REP	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands
----	-----	---



## ANTI-STRIATED MUSCLE ANTIBODY TEST SYSTEM

Die Tests sind für die *diagnostische Verwendung in vitro* bestimmt.

AD SRM48 48 Tests  
AD SRM96 96 Tests

### Testtitel:

IFT für den Nachweis von IgG-Antikörpern gegen gestreifte Muskulatur in Patientenserum

### Verwendungszweck:

Der indirekte Immunfluoreszenztest wird als Screeningtest für zirkulierende Antikörper gegen gestreifte Muskulatur im Patientenserum empfohlen.

### Prinzip:

Die primäre Testreaktion erfasst im Serum des Patienten zirkulierende Antikörper, die sich an ihre homologen Antigene anlagern. Dies findet in der Inkubationszeit statt, während das Serum die Antigenoberfläche bedeckt. Auf einen Auswaschvorgang, in dem alle ungebundenen humanen Antikörper entfernt werden, folgt eine sekundäre Reaktion. Das in der sekundären Reaktion verwendete Reagens ist ein fluoreszenzmarkiertes Antihumanoglobulinkonjugat. Die Antigenoberfläche wird danach vollständig von ungebundenem Konjugat freigespült und unter einem geeigneten Fluoreszenzmikroskop betrachtet.

### Bereitgestellte Materialien:

Lagerung und Stabilität von Komponenten:

1. Ratte (Gestreifte Muskulatur) (bei 2-8 °C lagern)
2. Anti-gestreifte Muskulatur-Positivkontrolle (bei 2-8 °C lagern)
3. Universelle Negativkontrolle (bei 2-8 °C lagern)
4. FITC IgG H&L Konjugat mit Evans-Blau (bei 2-8 °C lagern AD CGER2)
5. Einbettungsmittel Nr. AD TMM3 lässt sich bei 2-8 °C stabil lagern. Weitere erforderliche, aber nicht bereitgestellte
6. Pufferpackung Nr. AD PBS1 – Phosphatgepufferte Salzlösung (rekonstituierter Puffer enthält keine Konservierungsmittel und sollte bei 2-8 °C gelagert werden).

### Weitere erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien:

Reagenzgläser und Gestell- oder Mikrotitersystem  
Einmalgebrauchspipetten  
Färbeschale und Objektträgerpinzette  
Feuchtkammer  
Messkolben (500 ml)  
Destilliertes H<sub>2</sub>O  
Fluoreszenzmikroskop  
Nichtfasernde Papiertücher

### Reagenz Vorbereitung:

1. Pufferpackung Nr. AD PBS1. Puffer mit 1 Liter sterilem destilliertem Wasser rehydratisieren.

### Probennahme:

Serologische Proben sollten unter aseptischen Bedingungen genommen werden. Hämolyse wird durch umgehende Trennung des Serums vom Koagulat vermieden. Serum sollte bei 2-8 °C gelagert werden, wenn es innerhalb weniger Tage analysiert werden soll. Serum lässt sich bei -20 °C oder darunter 3 bis 6 Monate lang lagern. Lipämisches und stark hämolytisches Serum sollte vermieden werden. Wenn Proben bei Raumtemperatur bereitgestellt werden, wird die Zugabe eines Konservierungsmittels wie 0,01% (Thimerosal) oder 0,095% Natriumazid sehr empfohlen.

### Testanweisung:

Screening: verdünnen Sie Testsera 1:40 in PBS.

Titrationen: setzen Sie die Serumverdünnungen in jeweils zweier Verdünnungsstufen an, beginnend bei 1:40 (d. h. 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 usw.)

1. Wenn die Objektträger Raumtemperatur erreicht haben, reißen Sie die Objektträgerhülle an der Kerbe auf. Entnehmen Sie den Träger vorsichtig, ohne die Antigenbereiche zu berühren. Der Objektträger ist nun einsatzbereit.
2. Geben Sie jeweils einen Tropfen gelöstes Serum (20 bis 30 µl) und Kontrolle auf die Antigenkavitäten.
3. Legen Sie den Objektträger mit dem Patientenserum und den Kontrollen 30 Minuten lang in eine Feuchtkammer bei Raumtemperatur (ungefähr 19-24 °C).
4. Nehmen Sie den Objektträger aus der Feuchtkammer, und lassen Sie das Serum auf ein Stück Papiertuch ablaufen. Spülen Sie verbleibende Sera mit einer Waschflasche vom Objektträger, wobei Sie sorgfältig darauf achten, den Spülstrahl nicht direkt auf die Kavität zu richten.
5. Fünf Minuten in PBS waschen. Wiederholen Sie den Vorgang mit frischem PBS.
6. Legen Sie ein Löschblatt auf den Labortisch, mit der absorbierenden Seite nach oben. Nehmen Sie den Objektträger aus dem PBS und drehen Sie ihn um, so dass die Gewebeseite der absorbierenden Seite des Löschblatts zugewandt ist. Richten Sie die Kavitäten auf die Löschblattlöcher aus. Legen Sie den Objektträger auf die Löschblattoberseite. Das Gewebe darf nicht austrocknen. Wischen Sie die Tr.gerrückseite mit einem nichtfasernden Papiertuch ab. Üben Sie beim Abwischen zum Absorbieren des Puffers genügend Druck auf den Objektträger aus.
7. Geben Sie 1 Tropfen (20-30 µl) Konjugat auf jede Antigenkavität. Wiederholen Sie die Schritte 3-6.
8. Geben Sie 4-5 Tropfen Einbettungsmittel auf den Objektträger.
9. Setzen Sie ein Deckglas von 22 x 70 mm auf. Untersuchen Sie den Objektträger unter einem Fluoreszenzmikroskop.  
Hinweis: Um die Fluoreszenz aufrechtzuerhalten, lagern Sie den präparierten Objektträger in einer Feuchtkammer in einem dunklen Kühlschrank.

### Qualitätskontrolle:

1. Positive und negative Serumkontrollen müssen täglich beim Testen einbezogen werden, um die Reproduzierbarkeit, Empfindlichkeit und Spezifität der Testprozedur zu bestätigen.
2. Die negative Serumkontrolle sollte zu geringer (+) oder ausbleibender Fluoreszenz führen. Sollte sich bei dieser Kontrolle helle Fluoreszenz zeigen, ist die Kontrollprobe, das Antigen, das Konjugat oder die Vorgehensweise möglicherweise fehlerhaft.

3. Die positive Serumkontrolle sollte zu heller Fluoreszenz von 3+ bis 4+ führen. Sollte sich bei dieser Kontrolle geringe oder keine Fluoreszenz zeigen, ist die Kontrollprobe, das Antigen, das Konjugat oder die Vorgehensweise möglicherweise fehlerhaft.

4. Zusätzlich zu positiven und negativen Serumkontrollen sollte eine PBS-Kontrolle durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Konjugat frei von unspezifischer Färbung des Antigenstrats ist. Wenn das Antigen bei der PBS-Kontrolle helle Fluoreszenz zeigt, wiederholen Sie mit frischem Konjugat. Wenn das Antigen noch immer fluoresziert, ist das Konjugat oder das Antigen möglicherweise fehlerhaft.

### Ergebnisse:


Beim IFT kommt es zu einer Färbung der quergestreiften Skelettmuskulatur. Der Prozentsatz an Patienten bei denen Antikörper gegen gestreifte Muskulatur vorkommen, variiert mit dem klinischen Zustand. (Tabelle I).

Patienten Gruppe	% Anti-Gestr. Antikörper
1. Alle MG Patienten	40%
2. MG mit Tumor des Thymus	90-100%
3. MG ohne Tumor des Thymus	30%
4. Tumor des Thymus ohne MG	25%

\*Das Fehlen von Anti-gestreifter Muskulatur Antikörper schließt einen Tumor des Thymus aus

### Vorkehrungen:

1. Alle humanen Bestandteile wurden mit Radioimmuntest auf (HBsAg) und HTLVIII/LAV mit einer FDA-erkannten Methode negativ getestet. (Nicht wiederholt reaktiv.) Dies gewährleistet jedoch nicht die Abwesenheit von HBsAg oder HTLVIII/LAV. Alle humanen Bestandteile sollten mit angemessener Sorgfalt gehandhabt werden.
2. Den Kontrollproben und dem Konjugat ist Natriumazid (0,095%) zugegeben.
3. Verwenden Sie keine Bestandteile über das Verfallsdatum hinaus.
4. Befolgen Sie die methodischen Anweisungen genau wie in dieser Beilage beschrieben, um gültige Ergebnisse zu gewährleisten.
5. Für diagnostische Verwendung in vitro.
6. Fassen Sie die Objektträger an den Kanten an, da direkter Druck auf die Antigenkavitäten das Antigen beschädigen kann.
7. Nach Beginn der Prozedur darf das Antigen in den Kavitäten nicht austrocknen. Dies kann zu falschen negativen Testergebnissen oder unnötigen Artefakten führen.
8. Verwenden Sie getrennte Pipette Tips für jede Probe und Reagenz zu treffen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
9. Reagenzien geprüft werden sollen auf Anzeichen von Bakterien- oder Pilzbefall.
10. Nicht wiederverwenden Objektträger.

Komponente	AD PBS1 PBS Pufferpackung	Sicherheitshinweis
	AD TMM3 Einbettungsmittel	<b>Prävention:</b> P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Piktogramm		<b>Antwort:</b> P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen... Weiter spülen.
Signalwort	<b>ACHTUNG</b>	Möglichkeit entfernen... Weiter spülen.
Gefahrenhinweis	H319 Verursacht schwere Augenreizung.	P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**ALPHADIA sa/nv**  
DIAGNOSTIC PRODUCTS  
Avenue Vésale 26  
B1300 WAVRE  
BELGIUM  
TEL : 32 (0) 10 24 26 49  
FAX : 32 (0) 10 24 55 99  
contact@alphadia.be



EC	REP	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands



## ANTI-STRIATED MUSCLE ANTIBODY TEST SYSTEM

Per uso *diagnostico in vitro*.

AD SRM48 48 Tests  
 AD SRM96 96 Tests

### Titolo del test:

Test IFA per Anticorpi anti-muscolo striato

### Uso previsto:

Il test di immunofluorescenza indiretta è raccomandato come test di screening per gli anticorpi anti-muscolo striato nel siero del paziente.

### Principi:

La reazione primaria del test implica la circolazione nel siero del paziente di anticorpi che si legano ai loro antigeni omologhi. Ciò si verifica durante il periodo di incubazione, quando il siero ricopre la superficie dell'antigene. Successivamente ad un periodo di risciacquo necessario per la rimozione degli anticorpi umani non legati, avviene una reazione secondaria. Il reagente utilizzato nella reazione secondaria è un coniugato antiglobulina umana marcato con fluoresceina. La superficie dell'antigene viene quindi completamente risciacquata in modo da eliminare il coniugato non legato e quindi osservata con un idoneo microscopio a fluorescenza.

### Materiali in dotazione:

Conservazione e stabilità dei componenti:

1. Sezione di muscolo striato di ratto (conservare a una temperatura di 2-8°C).
2. Controllo positivo anti-muscolo striato (conservare a una temperatura di 2-8°C).
3. Controllo negativo universale (conservare a una temperatura di 2-8°C).
4. Coniugato FITC IgG H&L con Blu di Evans (conservare a una temperatura di 2-8°C). n. AD CGER2
5. Confezione tampone n. AD PBS1 - Tampone fosfato. Il tampone ricostituito non contiene conservanti e deve essere conservato a una temperatura di 2-8°C.
6. La soluzione di montaggio n. AD TMM3 rimane stabile se conservata a una temperatura di 2-8°C.

### Materiali aggiuntivi richiesti ma non indotazione:

Provette per test e cestello o sistema per microtitolazione

Pipette monouso  
 Vaschetta per colorazione e pinze per vetrini  
 Camera umida  
 Pallone volumetrico (500 ml)  
 Acqua distillata  
 Microscopio a fluorescenza  
 Carta assorbente che non lasci residui

### Preparazione del reagente:

1. Confezione tampone n. AD PBS1. Reidratate il tampone con 1 litro di acqua distillata sterile.

### Raccolta dei campioni:

Raccogliere i campioni sierologici in condizioni asettiche. L'emolisi viene evitata separando tempestivamente il siero dal coagulo. Conservare il siero a una temperatura di 2-8°C se questo deve essere analizzato entro pochi giorni. È possibile conservare il siero per un periodo di 3-6 mesi a una temperatura pari o inferiore a -20° C. Evitare il siero lipemico e fortemente emolitico. Se i campioni vengono spediti a temperatura ambiente, si raccomanda l'aggiunta di un conservante come il timerosal 0,01% o sodio azide 0,095%.

### Istruzioni per il test:

Screening: diluire i sieri da testare 1:40 in tampone fosfato.  
 Titolazioni: impostare diluizioni di siero al raddoppio a partire da 1:40 (cioè 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, ecc.)

1. Quando i vetrini raggiungono la temperatura ambiente, strapparne l'involucro in corrispondenza dell'apposita tacca. Rimuovere con cautela il vetrino dall'involucro evitando di toccare le aree su cui è presente l'antigene. Il vetrino è pronto per l'uso.
2. Versare una goccia di siero diluito (da 20 a 30 µl) e i controlli sui pozzetti dell'antigene.
3. Posizionare il vetrino con il siero del paziente e i controlli in una camera umida a temperatura ambiente (circa 19-24°C) per 30 minuti.
4. Rimuovere il vetrino dalla camera umida e per fare gocciare il siero su un pezzo di carta assorbente. Risciacquare delicatamente il siero rimanente sul vetrino con spruzzetta per lavaggio facendo attenzione a non dirigere il getto direttamente sul pozzetto.
5. Lavare in tampone fosfato per cinque minuti. Ripetere la procedura utilizzando tampone fosfato fresco.
6. Posizionare un tampone di carta assorbente sul tavolo del laboratorio con il lato assorbente rivolto verso l'alto. Rimuovere il vetrino dal tampone fosfato e capovolgerlo in modo che il lato su cui è applicato il campione di tessuto sia a contatto con il lato assorbente del tampone. Allineare i pozzetti con i fori del tampone. Posizionare il vetrino sulla parte superiore del tampone. Non lasciare asciugare il tessuto. Pulire la parte posteriore del vetrino con carta assorbente asciutta che non lasci residui. Assorbire il tampone fosfato con la carta esercitando una leggera pressione ed accertarsi che il vetrino sia asciutto.
7. Versare 1 goccia (20-30 µl) di coniugato in ciascun pozzetto di antigene. Ripetere le fasi da 3 a 6.
8. Versare 4-5 gocce di soluzione di montaggio sul vetrino.
9. Applicare un vetrino coprioggetto da 22 x 70 mm. Esaminare il vetrino al microscopio a fluorescenza.

Nota: per mantenere la fluorescenza, conservare il vetrino montato in una camera umida all'interno di un refrigeratore al buio.

### Controllo di qualità:

1. I controlli di siero positivo e negativo devono essere inclusi in tutti i test del giorno per confermare la riproducibilità, la sensibilità e la specificità della procedura.
2. Il controllo di siero negativo deve visualizzare una fluorescenza minima (+) o nulla. Una eventuale fluorescenza evidente di questo controllo indica un problema a livello di controllo, di

antigene, di coniugato o di procedura tecnica.

3. Il controllo di siero positivo deve visualizzare una fluorescenza evidente da 3+ a 4+. Una eventuale fluorescenza minima o nulla di questo controllo indica un problema a livello di controllo, di antigene, di coniugato o di procedura tecnica.
4. In aggiunta ai controlli di siero positivi e negativi, eseguire un controllo con tampone fosfato per stabilire se il coniugato è libero da colorazioni non specifiche del substrato dell'antigene. Se l'antigene mostra una fluorescenza evidente nel controllo con tampone fosfato, ripetere la procedura utilizzando coniugato fresco. La presenza continua di fluorescenza indica un problema a livello del coniugato o dell'antigene stesso.

### Risultati:

Il test IFA darà come risultato un pattern di colorazione a striatura crociata del muscolo scheletrico. Le percentuali dei pazienti con anticorpi anti-muscolo striato varia con lo stato clinico (Tabella I).

Tabella I


Anticorpi anti Muscolo Striato e Stato di Malattia

Popolazione Paziente	% Ab Anti-Str
1. Tutti pazienti MG	40%
2. MG con Timoma	90-100%
3. MG senza Timoma	30%
4. Timoma senza MG	25%

\*L'assenza di anticorpi anti-Str esclude effettivamente il timoma.

### Precauzioni:

1. Tutti i componenti umani sono stati testati mediante test radioimmunologico per (HBsAg) e HTLVIII/LAV con metodo approvato dalla FDA e sono risultati negativi (non reattivi ripetutamente). Tuttavia, questo non garantisce l'assenza di HBsAg o HTLVIII/LAV. Tutti i componenti umani devono essere manipolati con estrema cautela.
2. Sodium azide (0,095%) è compresa in controlli e coniugato.
3. Non utilizzare componenti scaduti.
4. Per garantire risultati validi, seguire le istruzioni procedurali esattamente come vengono descritte in questo inserto.
5. Per uso diagnostico in vitro.
6. Manipolare i vetrini prendendoli dai bordi in quanto la pressione diretta sui pozzetti dell'antigene può danneggiare l'antigene stesso.
7. Dopo aver iniziato la procedura, non fare asciugare l'antigene nel pozzetto. Ciò può comportare risultati falsi negativi o artefatti inutili.
8. Separate le punte della pipetta per ogni campione e dei reagenti per evitare la contaminazione incrociata.
9. I reattivi devono essere controllati per la prova di contaminazione batterica o fungina.
10. Non riutilizzare vetrini con substrate.

<b>Componente</b>	AD PBS1 PBS Confezione tampone AD TMM3 soluzione di montaggio	<b>Consiglio di prudenza</b> <b>Prevenzione:</b> P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Il viso. <b>Risposta:</b> P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
<b>Pittogramma</b>		
<b>AVVERTENZA</b>	<b>ATTENZIONE</b>	
<b>Indicazione di Pericolo</b>	H319 Provoca grave irritazione oculare.	

**ALPHADIA sa/nv**  
 DIAGNOSTIC PRODUCTS  
 Avenue Vésale 26  
 B1300 WAVRE  
 BELGIUM  
 TEL : 32 (0) 10 24 26 49  
 FAX : 32 (0) 10 24 55 99  
 contact@alphadia.be



**EC REP** Emurgo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 The Netherlands



## ANTI-STRIATED MUSCLE ANTIBODY TEST SYSTEM

Para uso diagnóstico *in vitro*.

AD SRM48 48 Tests  
AD SRM96 96 Tests

### Nombre de la prueba:

Ensayo de anticuerpos anti-músculo estriado IgG

### Aplicación:

La prueba de inmunofluorescencia indirecta se recomienda como prueba de detección para autoanticuerpos circulantes anti-músculo estriado IgG en suero del paciente.

### Principio:

La principal reacción de la prueba consiste en la unión de anticuerpos circulantes del suero del paciente a sus antígenos homólogos. Esto sucede durante el período de incubación en el que el suero recubre la superficie de antígeno. Tras un período de lavado para eliminar los anticuerpos humanos que no se han unido se procede a una reacción secundaria. El reactivo utilizado en la reacción secundaria es un conjugado de anticuerpos contra la globulina humana marcados con fluoresceína. A continuación, la superficie de antígeno se aclara a fondo para eliminar el conjugado que no se ha unido y se examina en un microscopio de fluorescencia adecuado.

### Materiales suministrados:

Almacenamiento y estabilidad de los componentes

1. Rata (striated músculo) (almacenar a 2 - 8°C)
2. Control positivo de músculo le striado (almacenar a 2 - 8°C).
3. Control negativo universal (almacenar a 2 - 8°C).
4. Conjugado IgG (H y L) de FITC con azul de Evans (almacenar a 2 - 8°C).
5. Sobre de tampón n.º AD PBS1 - tampón fosfato salino (PBS, el tampón reconstituido no contiene conservantes y debe almacenarse a 2 - 8°C).
6. El medio de montaje n.º AD TMM3 es estable cuando se almacena a 2 - 8°C.

### Otros materiales necesarios pero no suministrados:

Tubos de ensayo y gradilla, o sistema de micro-titulación

Pipetas desechables

Placa de tinción y pinzas para portaobjetos

Cámara húmeda

Matraz volumétrico (500 ml)

Agua destilada

Microscopio de fluorescencia

Toallas de papel que no dejen pelusa

### Preparación del reactivo:

1. Sobre de tampón n.º AD PBS1. Rehidratar el tampón con 1 litro de agua destilada estéril.

### Toma de muestras:

Las muestras serológicas deben extraerse en condiciones asépticas. La hemólisis se evita separando rápidamente el suero del coágulo. Si se va a analizar en pocos días, el suero debe almacenarse a 2 - 8°C. Puede conservarse de 3 a 6 meses a una temperatura de -20°C o inferior. No conviene utilizar sueros lipémicos o fuertemente hemolíticos. Si las muestras se guardan a temperatura ambiente, es altamente recomendable añadir un conservante, como por ejemplo timerosal al 0,01% o azida sódica al 0,095%.

### Instrucciones del ensayo:

Detección: diluya los sueros de prueba en proporción 1:40 en PBS.

Titulaciones: prepare diluciones de suero seriadas en proporción 2x a partir de 1:40 (es decir, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 etc.).

1. Una vez que el portaobjetos alcance la temperatura ambiente, rasgue el envoltorio tirando de la pestaña. Saque cuidadosamente el portaobjetos, evitando tocar las zonas de antígeno. El portaobjetos está listo para usar.
2. Ponga una gota del suero diluido (de 20 a 30 µl) y de los controles en los pocillos de antígeno.
3. Coloque el portaobjetos con el suero del paciente y los controles en una cámara húmeda a temperatura ambiente (aproximadamente 19-24 °C) durante 30 minutos.
4. Retire el portaobjetos de la cámara húmeda, sujételo de canto sobre una toalla de papel para vaciar el suero. Utilice un frasco lavador para aclarar suavemente los restos de suero del portaobjetos procurando no dirigir el chorro directamente hacia el pocillo.
5. Lávelo en PBS durante cinco minutos. Repita la operación con PBS nuevo.
6. Coloque un secante sobre la poyata de laboratorio con la cara absorbente hacia arriba. Retire el portaobjetos del PBS, dele la vuelta de modo que la cara de tejido quede orientada hacia la cara absorbente del secante. Alinee los pocillos con los orificios del secante. Coloque el portaobjetos sobre el secante. No deje que el tejido se seque. Seque el dorso del portaobjetos con una toalla de papel que no deje pelusa. Al secarlo, aplique al portaobjetos la presión necesaria para absorber el tampón.
7. Ponga 1 gota (20-30 µl) de conjugado en cada pocillo de antígeno. Repita los pasos 3 a 6.
8. Ponga 4 ó 5 gotas de medio de montaje en el portaobjetos.
9. Coloque un cubreobjetos de 22 x 70 mm. Examine el portaobjetos con un microscopio de fluorescencia.

Nota: para mantener la fluorescencia, guarde el portaobjetos montado en la nevera dentro una cámara húmeda y a oscuras.

### Control de calidad:

1. Para confirmar la reproducibilidad, sensibilidad y especificidad del ensayo es necesario incluir controles de suero positivo y negativo en los análisis todos los días.
2. El resultado del control de suero negativo debe ser poca (+) o ninguna fluorescencia. Si este control muestra una fluorescencia brillante, el problema puede estar en el control, el antígeno, el conjugado o en la técnica.
3. El resultado del control de suero positivo debe ser una fluorescencia brillante del orden de 3+ a 4+. Si este control muestra poca o ninguna fluorescencia, el problema puede estar en el control, el antígeno, el conjugado o en la técnica.
4. Además de los controles de suero positivo y negativo, debe analizarse un control de PBS para confirmar que el conjugado no tinte el sustrato de antígeno de manera inespecífica. Si el

antígeno presenta una fluorescencia brillante en el control de PBS, repita el análisis usando conjugado nuevo. Si el antígeno sigue presentando fluorescencia, el problema puede estar en el conjugado o en el antígeno.

### Resultados:

El resultado es un patrón con unas manchas estriadas-cruzadas del músculo esqueleto. Los porcentajes de pacientes con anticuerpos anti-músculo estriado varía con el estado clínico (Tabla I)

Tabla I


Anticuerpos Músculo Estriado y Estado de la Enfermedad

Población de pacientes	% Anti-Ab Estr.
1. Todos los pacientes MG	40%
2. MG con Timoma	90-100%
3. MG sin Timoma	30%
4. Timoma sin MG	25%


\*Ausencia de Anti-Ab Estr efectivamente excluye timoma.

### Precauciones:

1. Todos los componentes humanos han sido probados mediante radioinmunoensayo para (HBsAg) y HTLVIII/LAV con un método aprobado por la FDA, y han dado resultados negativos (no repetidamente reactivos). No obstante, esto no garantiza la ausencia de HBsAg o HTLVIII/LAV. Todos los componentes humanos deben manipularse con las debidas precauciones.
2. Los controles y el conjugado contienen sodium azide (0,095%).
3. No utilice ningún componente que haya sobrepasado la fecha de caducidad.
4. Para garantizar la validez de los resultados, siga las instrucciones del procedimiento exactamente como aparecen aquí.
5. Para uso diagnóstico *in vitro*.
6. Sujete los portaobjetos por los bordes, ya que la presión directa sobre los pocillos puede estropear el antígeno.
7. Una vez iniciado el procedimiento, no deje que el antígeno de los pocillos se seque. Esto podría dar falsos negativos o producir artefactos innecesarios.
8. Use distintas puntas de pipeta para cada una de las muestras y reactivos para evitar la contaminación cruzada.
9. Los reactivos deben inspeccionarse en busca de evidencias de contaminación bacteriana o micótica.
10. No reutilizar portaobjetos.





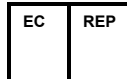



Componente	AD PBS1 Sobre de tampón	Consejos de prudencia
	AD TMM3 medio de montaje	<b>Prevención:</b> P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
<b>Pictograma</b>		<b>Respuesta:</b> P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
<b>Palabra Clave</b>	<b>ATENCIÓN</b>	P337+P313 Si persiste la irritación ocular. Consultar a un médico.
<b>Indicación de Peligro</b>	H319 Provoca irritación ocular grave.	

**ALPHADIA sa/nv**  
DIAGNOSTIC PRODUCTS  
Avenue Vésale 26  
B1300 WAVRE  
BELGIUM  
TEL : 32 (0) 10 24 26 49  
FAX : 32 (0) 10 24 55 99  
contact@alphadia.be



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



	Manufactured by Prodotto da Fabricado por Fabriqué par hergestellt von
<b>REF</b>	Catalog number Numero di catalogo Número de Catálogo Numéro de catalogue Katalognummer
<b>LOT</b>	Lot Lotto Lote Lot Charge
<b>EC REP</b>	EC Authorized Representative Rappresentante Autorizzato CE Representante Autorizado CE CE Représentant autorisé EG autorisierter Bevollmächtigter
	EC Declaration of Conformity Dichiarazione di Conformità CE Declaración de Conformidad CE CE Déclaration de Conformité EG Konformitätserklärung
	Number of tests Numero di test Número de determinaciones Nombre de tests Anzahl der Teste
	See instructions for use Vedere le istruzioni per l'uso Consultar la instrucciones de uso Voir instructions Gebrauchsanweisung beachten
	Expiration date Data di scadenza Caducidad Date d'Expiration Haltbarkeitsdatum
	Store at 2-8°C / 35-46°F Conservare a 2-8°C/35-46°F Almacenar a 2-8°C / 35-46°F Conserver à 2-8°C Bei 2-8°C / 35-46°F lagern
	Caution Attenzione Precaución Précautions Achtung
	Potential biological risk Potenziale rischio biologico Riesgo potencial biológico Biohazard Risque Biologique Potentiel Potentielle biologische Gefährdung
<b>RFU</b>	Ready for use Pronto all'uso Listo para su uso Prêt à l'emploi Gebrauchsfertig
<b>IVD</b>	For in vitro diagnostic use Per uso diagnostico <i>in vitro</i> Para uso solo in vitro Usage in vitro Für in-vitro diagnostische Verwendung
<b>RUO</b>	For research use only Solo per ricerca Para uso solo en investigación Pour recherche Nur für Forschungszwecke
<b>IUO</b>	For investigational use only Solo per uso investigativo Para uso solo en investigación Pour investigation Nur für Forschungszwecke
<b>IFA/DFA</b> <b>PBS</b>	Phosphate Buffered Saline Tampone salino fosfato Fosfato Salino Tamponado Tampon phosphate salin PBS
<b>SOR</b>	Sorbent Assorbent Sorbente Absorbant Sorbens

<b>SLIDE</b>	Tissue Substrate Slide Vetrini con substrate di tessuto Porto objetos de Sustrato de Tejido Lame portant le substrat tissulaire Gewebesubstrat-Objekträger
<b>MM</b>	Mounting Medium Mezzo di montaggio Medio de Montaje Liquide de montage Eindeckmedium
<b>10x</b>	Concentration Concentrazione Concentración Concentration Konzentration
<b>ENS</b>	Enhancement solution Soluzione di rinforzo Solución de realce Solution d'amplification Verstärkungslösung
<b>WASHB</b>	Wash Buffer Tampone di lavaggio Tampón de lavado Tampon de lavage Waschpuffer
<b>MPS 12x8</b>	Microplate Strips Strip per Micropiastra Tiras de micro placa Microplaque Mikrotiterplattenstreifen
<b>CONJ</b>	Conjugate Coniugato Conjugado Conjugué Konjugat
<b>SUB</b>	Substrate Substrato Sustrato Substrat Substrat
<b>STOP</b>	Stop Solution Soluzione bloccante Solución de Parada Solution d'arrêt Stopplösung
<b>CAL X</b>	Calibrator(s) Calibratore (i) Calibrador (s) Calibreur(s) Kalibrator(en)
<b>CONTROL -</b>	Negative Control Controllo Negativo Control Negativo Contrôle Négatif Negative Kontrolle
<b>CONTROL +</b>	Positive Control Controllo Positivo Control Positivo Contrôle Positif Positive Kontrolle
<b>CONJ CNS</b>	Counterstain Colorante di contrasto Contraste Contre colorant Gegenfärbung
<b>CS</b>	Coverslip Coprioggetto Cubre portaobjetos Lamelles couvre-objet Deckgläshen
<b>CONJ +</b>	Positive Conjugate Conjugato Positivo Conjugado Positivo Conjugué Positif Positivkonjugat
<b>CONJ -</b>	Negative Conjugate Conjugato Negativo Conjugado Negativo Conjugué Négatif Negativkonjugat
<b>DIL</b>	Sample Diluent Diluente del campione Diluyente de muestra Tampon de dilution Probenverdünnungslösung